



SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER



*Bedre livskvalitet og
mere velfærd for pengene*

Sundhedsstyrelsens tilladelse til fabrikation af medicinsk udstyr efter mål - klasse I

Pro Comfort fik i 2014 Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fabrikere medicinsk udstyr efter mål - klasse I. Det betyder helt enkelt, at vi kan skabe hjælpemiddelløsninger til funktionsnedsatte, der tilgodeser den enkeltes behov 100%.

Løsninger, der både er **bedre og billigere** end standardhjælpemidler, når det gælder svært handicappedes særlige udfordringer.

Behovsanalyse og uvildig rådgivning

Vores konsulent kommer ud hos borgeren og laver en uvildig vurdering af behovet sammen med terapeuten, borgeren og evt. hjælper og/eller pårørende. Behovsanalysen munder ud i et forslag til løsning, der kan fungere i borgerens hverdagsliv, og forbedre arbejdsforholdene for de mennesker, der er omkring borgeren.

På denne baggrund udarbejder vi et tilbud og en arbejdsbeskrivelse (ABS), som danner grundlag for det videre arbejde.

UVILDIG
RÅDGIVNING

OPTIMAL
LØSNING

BEDST
OG
BILLIGST

Optimal løsning

Løsningen kan være én af flere mulige:

- Tilpasning af brugerens eget hjælpemiddel
- Indkøb og tilpasning af nyt hjælpemiddel
- Tilpasning af brugt hjælpemiddel fra kommunens hjælpemiddeldepot

Hurtig hjælp med lang virkning


Typisk henter vi hjælpemidlet ude hos borgeren om morgenen, udfører arbejdet og leverer hjælpemidlet retur senere samme dag. Altid efter aftale og med fokus på, at borgeren skal undvære sit hjælpemiddel i kortest mulige tid, da vi ved, at et funktionelt hjælpemiddel er væsentligt for, at borgeren kan deltage i sit hverdagsliv.

I enkelte tilfælde er der behov for, at vores konsulent kommer ud på et besøg mere, når borgeren tager hjælpemidlet i brug.



Hvad siger reglerne?

Sundhedsstyrelsens tilladelse indeholder en række krav, vi naturligvis opfylder:

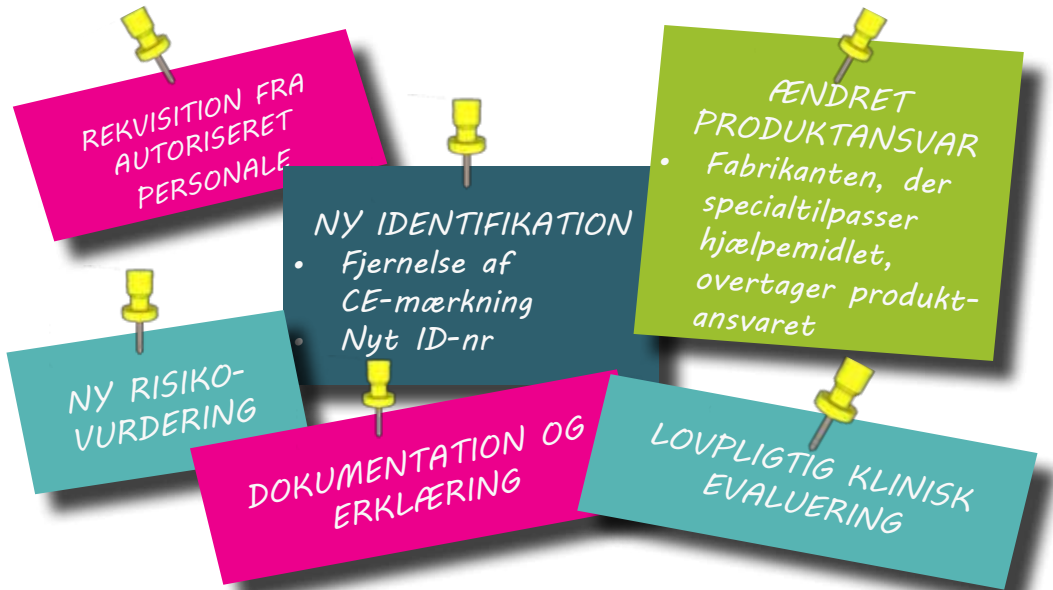

- Opgaven bestilles af terapeut, læge eller andet autoriseret personale via en rekvisitionsblanket, som udleveres af Pro Comfort og returneres udfyldt sammen med den oprindelige brugervejledning
- Ændringer dokumenteres og erklæring udarbejdes
- Risikovurdering af det specialtilpassede hjælpemiddel foretages
- Ny identifikation af hjælpemidlet - det oprindelige CE-mærke fjernes, der påføres nyt ID nummer og foretages registrering
- Pro Comfort overtager produktansvaret*) fra produktets oprindelige fabrikant
- Opgaven afsluttes med en klinisk evaluering efter hjælpemiddel er taget i anvendelse af brugeren

) Hvis ændringer derimod foretages af en producent **uden særlig tilladelse, vil produktansvaret i stedet overgå til ordregiver, som i mange tilfælde er kommunen. Ingen har automatisk tilladelse til at udføre disse konstruktionsændringer – heller ikke den oprindelige producent eller kommunens eget værksted.*

Store fordele og penge at spare....

BORGER

- Bedre siddestilling og færre gener
- + Bedre trykfordeling og nedsat risiko for tryksår
- + Større tryghed
- = Bedre livskvalitet

HJÆLPER

- Bedre arbejdsstillinger
- + Færre sygedage
- + Mindre plejetid
- = Bedre arbejdsmiljø

TERAPEUT

- Hurtigere sagsbehandling
- + Færre henvendelser fra borger
- = Større arbejdsglæde

KOMMUNE

- Færre lønudgifter
- + Sparet sagsbehandlingstid
- + Færre udgifter til behandling af tryksår
- = Bedre sundhedsøkonomi og mere velfærd

CASE - Specialtilpasning af el-kørestol

UDGANGSPUNKT

Efter flere fejlslagne standardløsninger, henvendte terapeuten sig til Pro Comfort for at finde en løsning til tryksårsplaget borger i en Typhoon el-kørestol.

PROBLEMSTILLING

Borger havde i perioder store problemer med tryk på begge siddeknogler samt sår på indersiden af begge knæ pga. kraftige muskelspændinger knæ mod knæ.

LØSNING

- Roho pude blev indbygget i siddepuden, understøttet af flere nøje udvalgte skumtyper
- Siddepuden blev skålformet en anelse for at give borger den ønskede fornemmelse af at sidde korrekt på siddepuden
- Anlægsfladen blev betrukket med to-vejs strækstof
- Abduktionsklods fremstillet i korrekt bredde og dybde med skumtype i forhold til tryk
- Klodsen blev gjort flytbar, så den kunne fjernes, når borger skulle ud og ind af stolen. Når klodsen ikke anvendes, placeres den på et beslag monteret bag på stolen



Bruger aflastede knæene med bold pga. kraftige muskelspændinger



Specialtilpasset siddepude og flytbar abduktionsklods til trykaflastning

EVALUERING

Borger blev afhjulpet med sine tryksår og udtrykte stor tilfredshed med løsningen. Familien udtrykte glæde over, at borger havde fået det meget bedre og var gladere i hverdagen. Hjelperne følte, det var blevet meget nemmere at udføre dagligdagens opgaver.

DIREKTE BESPARELSER I 3 ÅR

	År 1	År 2	År 3
Sparet hjælpertid ½ time pr. dag á kr. 125 i timen	22.812	22.812	22.812
Sparet tid for terapeut til besøg, opringninger og behandling af klager - 18 timer á kr. 400	7.200	7.200	7.200
Sparede udgifter til behandling af tryksår (estimeret)	50.000- 100.000	50.000- 100.000	50.000- 100.000
Rådgivning, tilpasning af kørestol samt afhentning/levering hos borger	-8.900		
Samlet årlig besparelse	71.112 -121.112	80.012 -130.012	80.012 -130.012

Beløb ekskl. moms

Læs mere om specialtilpasning på procomfort.dk og se flere cases og billedeksempler. Her kan du også finde link til Sundhedsstyrelsens regler på området for fabrikation af medicinsk udstyr efter mål - klasse I.

*“Specialtilpasning
giver mange fordele...”*



Pro Comfort

Broholmvej 9 - DK-5463 Harndrup

Tel. +45 7023 5010

info@procomfort.dk - procomfort.dk